

# 居家 COVID-19 檢測套組

接受檢測以協助保護所有紐約居民！NYC Health + Hospitals 為您家提供一套居家 COVID-19 檢測套組。任何 COVID-19 檢測結果呈陽性的人士，或者與 COVID-19 病患接觸過的人士，必須繼續與他人安全隔離，直到您的監控人員表示可以停止隔離。如果您已經接受了 COVID-19 檢測，請與家人和朋友分享這套居家 COVID-19 檢測套組。



## 您的居家 COVID-19 檢測套組包含：

- 鼻腔拭子
- 塑膠試管，又叫「穩定液試管」
- 內含禮卷代碼和啟動代碼的說明卡
- 塑膠袋，又叫「樣本袋」
- 寄件箱
- 密封貼紙
- FedEx 快遞袋

請閱讀盒中的說明來使用套組、寄出樣本並獲得結果。

### 寄件提醒：

記得在您註冊套組和接受檢測當天就寄出您的樣本。請勿在一天最後一次取件時間之後或在週末寄出您的檢測樣本。我們也建議您不要在週五寄出樣本。


您可以安排親友幫您投遞，或者預約上門取件。

**投遞：**請上 [fedex.com/dropbox](https://www.fedex.com/dropbox) 網站查看時間表，瞭解 Federal Express 在一天中的最後一次取件時間。您可以透過任何 FedEx Express 投遞箱寄送您的檢測樣本。我們強烈建議交由 FedEx Ship Center（寄件中心）寄送。

**上門取件：**要預約上門取件，請撥打 **1-800-463-3339 (1-800-Go FedEx)**。

說「Schedule a pickup」（預約取件）或按「1」。當它要求提供帳號時，請提供 FedEx 快遞袋上的「Return Tracking number」（回郵追蹤號碼）。

[請參閱背面的說明 >](#)

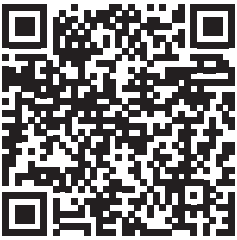

Please scan for English

Ju lutemi skanoni për shqip

يُرجى تصوير الرمز للغة العربية

অনুগ্রহ করে বাংলার জন্য স্ক্যান করুন

Veillez scanner pour la version en français

Tanpri eskane pou Kreyòl Ayisyen

कृपया हिंदी के लिए स्कैन करें

한국어로 스캔해 주십시오

Proszę sprawdzić wersję polską

Пожалуйста, сканируйте для русского языка

请扫描以获取简体中文版本

Escanee para español

請掃描以取得繁體中文版本


براه مہربانی اردو کے لیے سکین کریں

**NYC**  
**HEALTH+**  
**HOSPITALS**

**Test & Trace**  
**Corps**

## 說明：

- 閱讀套組中卡片上的說明。
- 開始之前，請上網站 [picturegenetics.com/covid19/group](http://picturegenetics.com/covid19/group) 註冊您的套組。按一下「**I have a kit already**」(我已有套組)。
- 輸入您的套組內的**禮卷代碼**以及內裝說明書封面上的**啟動代碼**，然後按一下「**Confirm Registration**」(確認註冊)。
- 如果看到提示，請選擇從 NYC Care Package 收到此套組。
- 檢測之前和之後都要洗手。
- 請勿在接受檢測之前清潔鼻子。您可以用沒有香味的紙巾擤鼻涕。
- 開啟**塑膠試管**並將其放在平坦的表面上以收納樣本。
- 接下來，打開**鼻腔拭子**。進入鼻孔之前或之後不要讓它接觸任何東西。
- 輕輕地將**鼻腔拭子**伸入鼻孔大約一英寸，直至觸及您的鼻腔頂部。用拭子刮擦大約 4 次。您應該不會感到不適。緩慢取出拭子。
- 用相同的拭子在另一個鼻孔中重複此步驟。
- 將**鼻腔拭子**放入**塑膠試管**，拭子頂端朝下（您放入鼻子的那一端）。
- 沿虛線折斷**鼻腔拭子**；應當很容易折斷為兩半。
- 確保**鼻腔拭子**位於試管的中央。然後，將**塑膠試管**蓋好，確保不滲漏。請小心，不要蓋得太緊。
- 將裝有**鼻腔拭子**的**塑膠試管**放入**塑膠袋**。
- 將**塑膠袋**放入**寄件箱**，然後用**密封貼紙**密封。
- 將**寄件箱**放入 **FedEx 快遞袋**。遵照您的套組上的寄送說明來做。
- 請保留您的**說明卡**當作記錄。

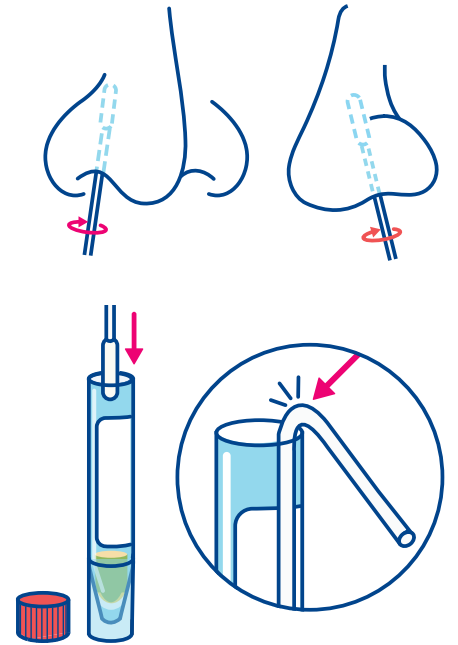

## 請記住：

- 在您註冊套組和接受檢測當天就寄送檢測樣本。您必須在 24 小時內寄出檢測樣本。請勿在一天的最後一次取件時間之後或在週末寄出您的檢測樣本。我們還建議您不要在週五寄出樣本。
- 您將在實驗室收到樣本後的 48 小時內獲得結果。可透過您的 Picture 門戶帳號獲得結果。

## 您應透過電子郵件驗證您的 Picture Genetics 帳號：

檢查您的收件匣中是否有來自 [donotreply@picturegenetics.com] 的驗證電子郵件。

您可以在 [picturegenetics.com/nasalswab](http://picturegenetics.com/nasalswab) 上找到這些說明和示範影片

## 要獲得支援，您可以透過以下方式聯絡 Picture Genetics：

電子郵件：[hello@picturegenetics.com](mailto:hello@picturegenetics.com)

即時聊天：透過 [PictureGenetics.com](http://PictureGenetics.com) 網站

電話：**626-434-3596**，週一至週五，美國東部標準時間中午 12 點至晚上 7 點

感謝您協助紐約市保持健康！希望您一切安好。